





VIHANMEDICO

🏠 Văn phòng: P 601 Toà nhà Thăng Long Số 105 Láng hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
📠 Nhà Máy: Tổ dân phố số 130, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
☎ Điện thoại đặt hàng: (84-24) 3562 2873

Bơm kim tiêm vô trùng

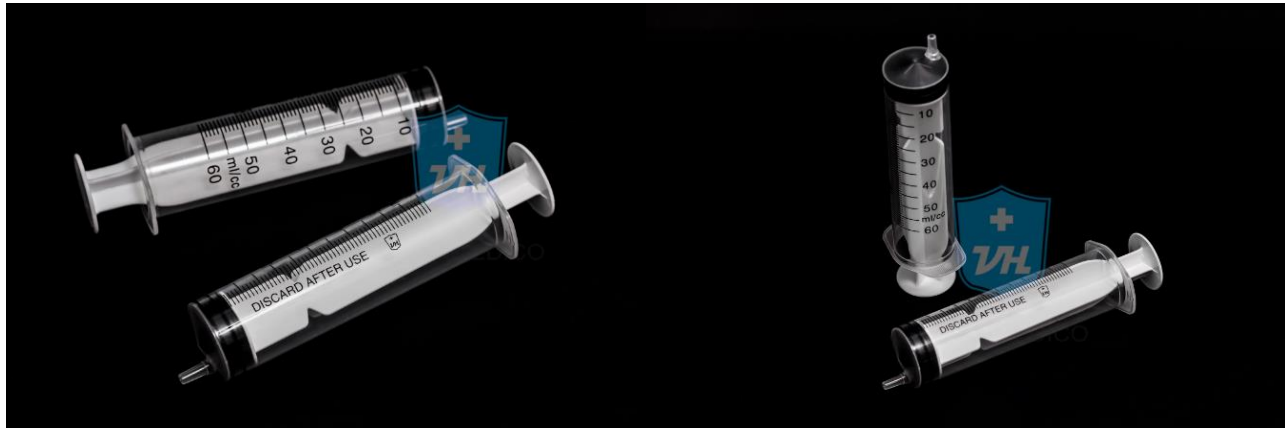

- Bơm tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 50ml
- Mã hàng hóa: BT50-KT-VH / BT50-BA-VH
- Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; GMP - FDA và TCVN

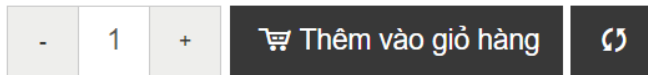

Mô tả

Bơm tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK loại 50ml

Mã hàng hóa: BT50-KT-VH / BT50-BA-VH

Giấy phép lưu hành sản phẩm: Số (No) 19/2018/BYT-TB-CT

Dung tích bơm tiêm: 50ml

Kích cỡ kim: (Tiêm) không kèm kim

Sản xuất tại: Công ty cổ phần thiết bị y tế VINAHANKOOK - Việt Nam

Nguyên liệu:

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế

Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.



VIHANMEDICO

🏠 Văn phòng: P 601 Toà nhà Thăng Long Số 105 Láng hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
📠 Nhà Máy: Tổ dân phố số 130, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
☎ Điện thoại đặt hàng: (84-24) 3562 2873

Chỉ tiêu kỹ thuật:

Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc to lắp vừa dây cho ăn.

Piston có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.

Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường

Chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim.

Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh.

Khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu bịt piston.

Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: Không bị gãy, không bị xoắn trong điều kiện sử dụng bình thường.

Quy cách đóng gói:

01 bơm kim tiêm/đơn vị đóng gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói (túi PE), sau đó sản phẩm được xử lý tiệt trùng bằng khí E.O theo quy trình kín

Bao gói hộp nhỏ (Duplex): 25 chiếc bơm kim tiêm/hộp

Bao gói thùng to (Carton) : 16 hộp nhỏ/thùng (tương đương 400 bơm kim tiêm/thùng)